



Optinen koherenssitomografia
Optical Coherence Tomography

OCT-A1

Käyttöohjeet

Tärkeää

- Käyttäjä on vastuussa lääkinällisen laitteiston käytön ja kunnossapidon hallinnasta. On suositeltavaa nimetä tietty henkilö vastaamaan kunnossapidosta, jotta varmistettaisiin, että tuote pidetään hyvässä kunnossa ja sen käyttö on turvallista.
- Tätä tuotetta käyttävän systeemin verkkoon yhdistäminen voisi aiheuttaa riskejä potilaille, koneenkäyttäjille tai kolmansille osapuolille. Kunnossapidosta vastaavan nimetyn henkilön tulisi arvioida nämä riskit etukäteen.

Vastaavan henkilön tulisi arvioida riskit myös silloin, kun verkkoon kohdistuvia muutoksia (mukaan lukien verkkokonfiguraation muutokset, tuotteiden lisääminen tai irtikytkeminen verkosta tai verkkoon yhdistetyn laitteiston päivitys tai parannus) tapahtuu yhteyden muodostamisen jälkeen.

Koneenkäyttäjän profiili

- Vain lääkäri tai laillisesti pätevä henkilö, jolla on yleistietoa oftalmologiasta ja joka kykenee ymmärtämään tämän käsikirjan, voi käyttää tuotetta.

Potilaskohderyhmä

- Pediatriset ja aikuispotilaat, jotka pystyvät pitämään päätään otsatukea ja leukatukea vasten kuvien ottamisen aikana (mukaan lukien raskaana olevat ja imettävät naiset), joilla ei ole vasta-aiheita ja sukupuolesta riippumatta.

Hoidonaiheet

- Tämä tuote on tarkoitettu verkkokalvon, verkkokalvon hermosäiekerroksen ja näköhermon pään in vivo -kuvantamiseen kuvallisen tiedon tuottamiseksi diagnoosia varten glaukooman, diabeettisen retinopatian tai silmänpohjan ikärappeuman kaltaisissa sairauksissa.

1 Johdanto

Yleiskatsaus

Tämä tuote ottaa digitaalisia valokuvia verkkokalvon muodosta ja tomografiakuvia potilaan silmistä noninvasiivisesti täysin automaattisen kohdistuksen avulla. Täysautomaattiset toimenpiteet voivat lyhentää tutkimusaikaa, ja automaattisen seurannan ansiosta tämä tuote voi ottaa kuvia, joilla on korkea toistettavuus.

Käyttöaiheet

Tämä tuote on optinen koherenssitomografiajärjestelmä, joka on tarkoitettu verkkokalvon, verkkokalvon hermosäiekerroksen ja näköhermon pään in vivo -kuvantamiseen ja mittaamiseen.

Tämä tuote ja sen normatiiviset tietokannat ovat kvantitatiivisia työkaluja ihmisen verkkokalvon hermosäiekerroksen ja makulan vertaamiseksi tunnettujen terveiden koehenkilöiden tietokantaan.

Se on tarkoitettu käytettäväksi takalohkon sairauksien diagnosoinnin ja hoidon apuna.

Canon OCT-A1:tä ei ole tarkoitettu käytettäväksi ainoana sairautta diagnosoivana välineenä. Pätevä lääkäri on vastuussa lopullisesta diagnoosista nojautuen muilla välineillä saatuihin mittaustuloksiin.

Vasta-aihe

Do not use this product for those patients who:

- jonka esitiedoissa on aiempaa valoihottumaa.
- joka on läpikäynyt fotodynaamisen terapian (PDT:n) lyhyen ajan kuluessa (tarkista annettavan valoherkisteen tuoteselosteesta kieltoajanjakson pituus).
- joilla on lääkitys, jonka sivuvaikutukset voivat aiheuttaa valoihottumaa.

Kokoonpano

Kokoonpano

- OCT-A1
- Virtajohto
- Synkronointikaapeli
- RX Capture for OCT-A1 -ohjelmisto

Lisävarusteina saatavat tuotteet

- Etulohkosovitin ASA-1
- Ulkoinen silmien fiksaatiovaloyksikkö EL-1
- RX-palvelinohjelmisto (lisenssi)
Palvelinohjelmisto
- RX-katseluohjelmisto (lisenssi)
Katseluohjelmisto
- OCT-angiografia (lisenssi)
OCT-angiografian valokuvaustoiminto.
- OCTA2 (lisenssi)
OCTA-kuvien laajakulmanäkymän, suuren erottelutarkkuuden, keskiarvoistuksen ja panoraaman aikaansaava toiminto.
- OCTA-analyysi (lisenssi)
Toiminto OCTA-kuvien analysointiin ja kvantifiointiin.
- Älykäs kohinanpoisto (lisenssi)
Toiminto kohinan vähentämiseen OCTA-kuvista.

Ohjelmiston käyttöympäristö

Ohjaustietokone, monitori, näppäimistö, hiiri, tulostin ja eristysmuuntaja ovat yleiskäyttöisiä laitteistoja.

Jokaisen laitteen on täytettävä seuraavat tekniset vaatimukset.

Laitteisto tai ohjelmisto	Tekniset tiedot
CPU (keskusyksikkö)	Intel-keskusyksiköt (vähintään 6 ydintä)
RAM (suorasaantimuisti)	16 Gt tai sitä enemmän 32 Gt tai sitä enemmän (kun OCTA-tutkimuksen edistyminen on käytössä) 64 Gt tai sitä enemmän (kun OCTA 2 on asennettuna)
GPU (grafiikkasuoritin)	NVIDIA-näytönohjain, joka tukee Compute Capability 5.0:n laskentakapasiteettia tai sitä uudempaa (grafiikkakortit, joiden suorituskyky on parempi kuin Quadro K2200 ja joilla on 4 Gt:n tai sitä suurempi videomuisti)
Näyttö	Näytön resoluutio: 1 920 × 1 080 pikseliä Näyttöruudun värit: 24 bittiä tai sitä enemmän
Kiintolevy	2 Tt tai sitä enemmän: RAID-1 (peilaus); koskee paikallista palvelinta (kun RX-palvelinta ei vielä oteta käyttöön) 100 Gt tai sitä enemmän: koskee etäpalvelinta (kun RX-palvelin otetaan käyttöön)
Liittymä	USB 2.0
Verkko	1000BASE-T tai sitä nopeampi
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows 11 Pro -versio 23H2 (64-bittinen)* Microsoft Windows 11 Pro -versio 24H2 (64-bittinen)*
Sovellus ohjelmisto	Microsoft .NET Framework -versio 4.8 SQL Server 2019 Express US -versio (64-bittinen) • Älykkään kohinanpoiston ollessa asennettuna tai käytettäessä GPU-prosessointia NVIDIA CUDA Toolkit 11.7
Kamera yhteyskortti	AVALDATA APX-3323
Hiiri	Rullahiiri

* Kosketusnäyttöruudun toimintoja ei tueta.

2 Turvallisuus

Säätelytiedot

Laitteen luokitus

Sähköiskujen vastainen
suojaustyyppi

Luokan 1 laitteisto

Sähköiskuilta suojaamisen aste

B-tyypin sovelletut osat
(leukatuki ja otsatuki)

CE-merkintä

Tämä tuote noudattaa seuraavaa säätelyä:

- asetus (EU) 2017/745
- direktiivi 2011/65/EU

Koskee Euroopan unionia

Ilmoitus vakavasta vaaratilanteesta

Kaikista tuotteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista (määritelty asetuksen (EU) 2017/745 2 artiklan 65 kohdassa) tulisi ilmoittaa valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.

Elektroniset käyttöohjeet

Käyttöohjeet ovat saatavilla verkkosivustolta asiakkaiden luettaviksi ja ladattaviksi.

- <https://global.canon/en/ifu/medcom/index.html>

Ota lisätietoja varten yhteyttä myyntiedustajaan tai paikalliseen Canon-jälleenmyyjään.

Turvallisuusvarotoimet

Käytä tätä tuotetta oikein loukkaantumisten ja tiedon menettämisen estämiseksi huolehtimalla turvallisuusvarotoimista.

Älä kosketa samanaikaisesti muiden kuin lääkinnällisen laitteiston johtavia osia ja potilasta.

Muuten seurauksena voisi olla sähköisku.

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ainoana sairautta diagnosoivana välineenä.

Pätevä lääkäri on vastuussa lopullisesta diagnoosista nojautuen muilla välineillä saatuihin analyysituloksiin.

Älä jätä alkoholia, tinneriä tai muita tulenarkoja kemikaaleja laitteen lähelle.

Älä aseta tulenarkoja liuottimia laitteen lähelle. Seurauksena voisi olla tulipalo, jos liuotinta läikkyä tai haihtuu ja joutuu kosketuksiin sisäisten sähköosien kanssa. Jotkut desinfiointiaineet ovat helposti syttyviä. Muista huolehtia varotoimista niitä käyttäessäsi.

Jos käyttäjä, jolla on sähköinen lääketieteellinen implantti, havaitsee poikkeaman välineen käytön aikana, hänen tulisi pysytellä turvallisen etäisyyden päässä lisälinssistä.

Lisälinssi sisältää magneetteja. Jos käyttäjä, jolla on sähköinen lääketieteellinen implantti, havaitsee poikkeaman välineen käytön aikana, hänen tulisi pysytellä turvallisen etäisyyden päässä lisälinssistä.

Älä asenna vedelle, höyrylle, kosteudelle tai pölylle altistuviin paikkoihin.

Tällainen toimenpide saattaa aiheuttaa ongelmia tai toimintahäiriöitä.

Älä asenna suolalle, rikille tai korrosiivisille kaasuille altistuviin paikkoihin.

Näin tehtäessä laitteeseen saattaa ilmaantua korroosiota, ongelmia tai toimintahäiriöitä.

Älä asenna epävakaisiin tai värinäalttiisiin paikkoihin.

Tärinä saattaa kaataa laitteen tai laite saattaa joutua epätasapainoon ja pudota aiheuttaen toimintahäiriön tai loukkaantumisen.

Älä aseta käsiä tai sormia leukatuen alle tai mittausyksikön ympärille.

Kättesi tai sormesi voivat jäädä puristuksiin ja vahingoittua. Ohjeista potilaat samalla tavoin olemaan asettamatta käsiään leukatuen alle tai mittausyksikön ympärille.

Älä aseta käsiä tai sormia mittausyksikön ja jalustan väliin.

Kättesi tai sormesi voivat jäädä puristuksiin ja loukkaantua mittausyksikön liikkuessa johonkin suuntaan. Ohjeista potilaat samalla tavoin olemaan asettamatta käsiään tai sormiaan mittausyksikön ja jalustan väliin.

Älä pidä kiinni kasvotuesta tai mittausyksiköstä siirtäessäsi tätä tuotetta.

Kun siirrät tuotetta, pidä kiinni jalustan nostolovista ja pidä tuote vaakasuorassa. Älä pitele sitä kasvotuesta tai mittausyksiköstä, sillä ne saattavat lähteä irti ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Varmista, että koko järjestelmä on IEC 60601-1 -standardin mukainen.

Käytä IEC 60601-1 -standardin mukaisia laitteita potilasympäristössä.

Käytä potilasympäristössä tietokonetta ja monioria, jotka ovat tuotetta koskevan IEC 60601-1 -järjestelmästandardin mukaisia. Myös IEC 62368-1 -standardin mukaista tietokonetta ja monitoria voidaan käyttää. Muista kuitenkin käyttää eristysmuuntajaa. Muuten seurauksena saattaa olla sähköisku. Ota lisätietoja varten yhteyttä myyntiedustajaan tai paikalliseen Canon-jälleenmyyjään.

Pidä otsatuki ja leukatuki puhtaina.

Pyyhi otsatuki etanolipitoisella desinfiointiaineella jokaista potilasta varten infektioriskin estämiseksi. Vaihda leukatuen paperi samalla tavoin jokaista potilasta varten infektioriskin estämiseksi.

Kysy asiantuntijalta yksityiskohtaisia neuvoja desinfioimiseen. Otsatuki saattaa korrodoitua, jos käytetään muuta kuin edellä mainittua desinfiointiainetta.

Siirrä mittausyksikköä hitaasti potilaan silmää kohti ottaessasi kuvaa.

Kun säädät mittausyksikön asentoa eteen–taakse-suunnassa, tuo mittausyksikkö hitaasti lähemmäs potilasta samalla, kun katsot potilaan kasvoja sivulta. Potilaan silmä saattaa vahingoittua, jos objektiivilinssi koskettaa sitä.

Tarkista kuva ennen tuotteen käyttämistä.

Ennen kuin käytät tätä tuotetta, varmista testikuvan ottamisella, ettei läsnä ole vierasaineita, jotka voivat vaikuttaa kuvan tulkintoihin tai diagnoosiin.

Varmista, että potilaan nimi, henkilötunnus, syntymäaika ja sukupuoli vastaavat potilaan kohdalle syötettyjä tietoja.

Jos syötetyissä tiedoissa on virheitä, potilaiden henkilöllisyydet saattavat olla virheellisiä. Tämä voi johtaa väärään diagnoosiin ja potilaan ruumiinvammaan.

Muista kiinnittää lisäotsatuki ja lisäleukatuki etulohkotomografian ajaksi.

Lisälinssin kiinnittäminen muuttaa työskentelyetäisyyttä. Lisäotsatukea ja lisäleukatukea käyttämättä potilaan silmä saattaa vammautua, jos linssi osuu siihen.

Älä koske mittausyksikköön sen liikkuesssa.

Mittausyksikkö siirtyy keskiasentoon, kun tuote käynnistetään. Älä koske mittausyksikköön sen liikkuesssa. Pidä potilaan leuka poissa leukatueltta.

Siirrä mittausyksikkö pakkausasentoon ennen tämän tuotteen pakkaamista.

Käytä tuotteen pakkausta sen kuljettamiseen.

Kun kuljetat tätä tuotetta, käytä alkuperäispakkausta tuotteen suojaamiseksi tärinältä ja iskuilta.

Tärinä ja isku saattaa aiheuttaa vian tai vaurion tähän tuotteeseen.

Ota lisätietoja varten yhteyttä myyntiedustajaan tai paikalliseen Canon-jälleenmyyjään.

Älä katkaise tämän tuotteen tai tietokoneen virtaa kuvakaappauksen, datasiirron tai varmuuskopioinnin aikana.

Tällainen toimenpide saattaa vahingoittaa tietokonetta tai vioittaa dataa.

Älä muuta käyttöjärjestelmän asetuksia (esim. näytön resoluutiota, päivämäärän muotoa, päivämäärää tai kieltä) ohjelmiston ollessa käynnissä.

Muuten tämä ohjelmisto ei välttämättä toimi asianmukaisesti.

Älä käytä ohjelmistoa ennen kuin kuvan tuonti tai siirto on saatu valmiiksi.

Muuten tämä ohjelmisto ei välttämättä toimi asianmukaisesti.

Älä irrota tämän tuotteen ja tietokoneen välistä kaapelia kuvakaappauksen tai datasiirron aikana.

Tällainen toimenpide saattaa vahingoittaa tietokonetta tai vioittaa dataa.

Älä asenna muita ohjelmistoja tämän ohjelmiston asentamisen jälkeen.

Älä asenna mitään muita kuin myyntiedustajan tai paikallisen Canon-jälleenmyyjän erityisesti mainitsemia ohjelmistoja. Muuten tämä ohjelmisto ja tuote eivät välttämättä toimi asianmukaisesti.

Pyydä verkonvastaavaa konfiguroimaan ja hallinnoimaan verkkoa, jotta järjestelmä voitaisiin liittää verkkoon.

Verkkoon liitettäessä verkkovastaavan tulisi konfiguroida asetukset ja tarkistaa, että verkko toimii asianmukaisesti.

Skannaa järjestelmä tietokonevirusten varalta ulkoisen datan tuomisen yhteydessä.

Kun liität USB-muistilaitteen tai kiintolevyn tai tuot dataa toiselta tietokoneelta, suorita virusskannaus. Jos tietokone on saanut viruksen, potilastiedot ja tutkimusdata voivat vahingoittua tai päätyä luvattomien henkilöiden käsiin.

Varmuuskopioi data ulkoiselle muistilaitteelle säännöllisesti.

Muuten tallennettu potilasdata saattaa olla saavuttamattomissa siinä tapauksessa, että ohjelmisto tai tietokone toimii huonosti.

Ohjelmistosta tulisi kirjautua ulos, kun se ei ole käytössä.

Kun et käytä ohjelmistoa, muista kirjautua siitä ulos luvattoman käytön estämiseksi.

Muista varmistaa lisälinssin asento silmämääräisesti liikuttaessasi mittaussyksikköä potilasta kohti.

Pitkittynyt skannaaminen voi aiheuttaa potilaille tilapäisiä näköhäiriöitä. Pidä riittävän pituiset tauot skannausten välillä.

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa potilaalle epämukavuutta tai lievän vamman. Noudata huolellisesti kaikkia potilaan asettelemista ja laitteen toimintaa koskevia ohjeita.

Virheellinen käsittely saattaa johtaa laitteen vaurioitumiseen. Käsittele laitetta varoen ja noudata kaikkia kunnossapito-ohjeita.

Ohjelmistovirheitä saattaa ilmetä. Mikäli ohjelmisto toimii odottamattomasti, käynnistä järjestelmä uudelleen ja ota yhteyttä tekniseen tukeen, jos ongelma toistuu.

IT-turvallisuutta koskevat varotoimet

Pyydä verkonvastaavaa konfiguroimaan ja hallinnoimaan verkkoa, jotta järjestelmä voitaisiin liittää verkkoon.

Verkkoon liitettäessä verkkovastaavan tulisi konfiguroida asetukset ja tarkistaa, että verkko toimii asianmukaisesti.

Ohjelmistosta tulisi kirjautua ulos, kun se ei ole käytössä.

Kun et käytä ohjelmistoa, muista kirjautua siitä ulos luvattoman käytön estämiseksi.

Skannaa järjestelmä tietokonevirusten varalta ulkoisen datan tuomisen yhteydessä.

Kun liität USB-muistilaitteen tai kiintolevyn tai tuot dataa toiselta tietokoneelta, suorita virusskannaus. Jos tietokone on saanut viruksen, potilastiedot ja tutkimusdata voivat vahingoittua tai päätyä luvattomien henkilöiden käsiin.

Varmuuskopioi data ulkoiselle muistilaitteelle säännöllisesti.

Muuten tallennettu potilasdata saattaa olla saavuttamattomissa siinä tapauksessa, että ohjelmisto tai tietokone toimii huonosti.

Älä irrota tämän tuotteen ja tietokoneen välistä kaapelia kuvakaappauksen tai datasiirron aikana.

Tällainen toimenpide saattaa vahingoittaa tietokonetta tai vioittaa dataa.

Älä katkaise tämän tuotteen tai tietokoneen virtaa kuvakaappauksen, datasiirron tai varmuuskopioinnin aikana.

Tällainen toimenpide saattaa vahingoittaa tietokonetta tai vioittaa dataa.

Älä asenna muita ohjelmistoja tämän ohjelmiston asentamisen jälkeen.

Älä asenna mitään muita kuin myyntiedustajan tai paikallisen Canon-jälleenmyyjän erityisesti mainitsemia ohjelmistoja. Muuten tämä ohjelmisto ja tuote eivät välttämättä toimi asianmukaisesti.

Älä muuta käyttöjärjestelmän asetuksia (esim. näytön resoluutiota, päivämäärän muotoa, päivämäärää tai kieltä) ohjelmiston ollessa käynnissä.

Muuten tämä ohjelmisto ei välttämättä toimi asianmukaisesti.

Älä käytä ohjelmistoa ennen kuin kuvan tuonti tai siirto on saatu valmiiksi.

Muuten tämä ohjelmisto ei välttämättä toimi asianmukaisesti.

Laserturvallisuus

Tämä tuote noudattaa säännöksen 21 CFR luvun 1 alalukua J luokan 1 laserlaitteena Yhdysvaltain terveys- ja sosiaalipalveluministeriön (U.S. Department of Health and Human Services, DHHS) säteilysuorituskykystandardin nojalla vuoden 1968 Radiation Control for Health and Safety Act -lain mukaan. Lisäksi tämä tuote on sertifioitu luokan 1 lasertuotteeksi standardien IEC 60825-1:2007, IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2007 ja EN 60825-1:2014 mukaisesti. Koska laitteen sisällä emittoitunut säteily eristetään täysin suojakoteloiden ja ulkokansien sisään, lasersäde ei pääse karkaamaan tavanomaisen käyttäjätoiminnan aikana.

Tietoja IT-turvallisuudesta

- Käyttäjävaatimukset

Vain lääkäri tai laillisesti pätevä henkilö, jolla on yleistietoa oftalmologiasta ja joka kykenee ymmärtämään tämän käsikirjan, voi käyttää tuotetta.

- Käyttöympäristö

Tämä tuote tulisi liittää sairaalaverkkoon. Verkkoon liitettäessä verkkovastaavan tulisi konfiguroida asetukset ja tarkistaa, että verkko toimii asianmukaisesti.

- Riskiprofiili

On mahdollista, että pahantahtoinen hyökkääjä käyttää järjestelmää, joten varmista uloskirjautumisesi tästä ohjelmistosta, kun se ei ole käytössä.

- Ohjelmistopäivitysten ja tietoturvan korjaustiedostojen eheyden/kelpuutuksen varmistamiseen liittyvät varautumiset

Ota yhteyttä myyntiedustajan tai paikalliseen Canon-jälleenmyyjään lisätietojen antamiseksi, sillä huoltohenkilöstö pyytää asianmukaiset tietoturvan korjaustiedostot käyttäjille. Valmistaja ilmoittaa huoltohenkilöille tietoturvan korjaustiedostojen sovellusmenetelmän toimintatarkastuksen jälkeen.

- Tietoturvan konfigurointivaihtoehdot

Palomuuriasetus konfiguroidaan automaattisesti niin, ettei järjestelmään voi päästä verkosta käsin. Ohjelmiston asentaja tekee palomuuriasetuksen oletusarvoisesti.

- Alkuperäiset konfigurointiohjeistukset

Sen jälkeen kun uusi käyttäjä on lisätty, uuden asennuksen yhteydessä konfiguroidun oletuskäyttäjätilin salasana on vaihdettava tai itse tili poistettava. Jos tämä vaihe ohitetaan, tietoturvaongelmia saattaa ilmetä.

- Ohjeet tietoturvapäivitysten käyttöönottoon

Windows updates -päivityksiä sovelletaan turvapäivityksiä varten.

- Vikasietotila

Tässä järjestelmässä on vikasietotila, jonka avulla järjestelmän käyttöä voidaan jatkaa myös verkko-ongelmien aikana. Kun verkko-ongelma havaitaan, järjestelmä käynnistää vikasietotilan automaattisesti. Vikasietotilassa tutkimuksen päivämäärä tallennetaan paikallisesti verkkosijainnin sijaan. Tämän jälkeen paikallinen data siirretään automaattisesti verkkosijaintiin ja vikasietotilasta poistutaan verkko-ongelman kadottua.

- IT-turvallisuuden valvonnat

Seuraavat tietoturva-asetukset ovat suositeltuja, ja ne asetetaan oletusarvoisesti. Windows-palomuri konfiguroidaan automaattisesti niin, ettei järjestelmään voi päästä ulkoisesta verkosta käsin. Windows Defender on käytössä.

- IT-turvallisuuteen liittyviä hälytysviestejä koskevat toimenpiteet

Viesti	Korjaustoimenpide
Ainakin yksi järjestelmänvalvoja tulisi nimetä.	Tätä käyttäjää ei voida poistaa, jos vain yksi henkilö on rekisteröity järjestelmänvalvojaksi. Lisää käyttäjä järjestelmänvalvojaksi ja poista sitten käyttäjä.
Parhaillaan kirjautuneena oleva käyttäjä ei ole poistettavissa.	– Kulloinkin sisäänkirjautuneena olevaa käyttäjää ei voida poistaa. Toisen järjestelmänvalvojan on kirjauduttava sisään käyttäjänä. – Tätä käyttäjää ei voida poistaa, jos vain yksi henkilö on rekisteröity järjestelmänvalvojaksi. Lisää käyttäjä järjestelmänvalvojaksi ja poista sitten käyttäjä.
Tietokantaa ei voida lukita	Kokeile toimenpidettä uudestaan muiden käyttäjien kirjauduttua ulos.
Potilasta ei voida lukita Potilasta ei voida poistaa	Kokeile toimenpidettä uudestaan toisen käyttäjän poistettua potilasvalinnan.

- Varmuuskopiointi- ja palautustoiminnot
(katso sivulta 22)

Käyttöhuomautukset

Ennen käyttöä

- Tarkasta tuote päivittäin. Varmista, ettei läsnä ole vierasaineita, jotka voisivat vaikuttaa kuvan tulkitsemiseen tai diagnooseihin.
- Objektiivilinssissä oleva lika tai naarmut tulevat esiin mustina pisteinä, jotka saattavat vaikuttaa kuvanlaatuun. Tarkista ja puhdista objektiivilinssi ennen kuvan ottamista.
- Huoneen äkillinen lämmittäminen talvella tai kylmillä alueilla saattaa aiheuttaa kondensoitumista objektiivilinssiin tai tuotteen sisäisiin optisiin osiin seurauksenaan se, ettei optimaalisia kuvia pystytä saamaan. Odota tässä tapauksessa, kunnes kondensoituminen häviää, ennen kuin otat kuvia.

Käytön jälkeen

- Sen jälkeen kun olet käyttänyt tuotetta, katkaise virta, kiinnitä objektiivilinssin suojuksen objektiivilinssin suojaamiseksi pölyltä ja aseta pölysuoja tuotteen päälle. Hyviä kuvia ei pystytä ottamaan, jos objektiivilinssi on pölyinen.

Puhdistaminen ja desinfiointi

- Älä päästä puhallinta koskettamaan linssiä.
- Älä pyyhi tai hankaa linssiä, jos siinä on likaa tai pölyä.
- Älä pyyhi linssiä etanoliliuksella, silmälasien puhdistusaineella tai silikonipäälysteisellä paperilla. Tällainen toimenpide voisi vahingoittaa linssin pintaa tai jättää jälkiä.
- Älä puhdista tuotteen ulkopuolta linssinpuhdistimella. Tällainen toimenpide voisi vahingoittaa tuotteen ulkopuolta.
- Älä käytä alkoholia, bentseeniä, tinneriä tai muita liuottimia tuotteen ulkopuolen puhdistamiseen. Tällainen toimenpide vahingoittaa tuotteen ulkopuolta.
- Älä käytä etanoliliuosta tuotteen ulkopuolen puhdistamiseen, paitsi otsatuen ja leukatuen ollessa kyseessä. Muuten tuotteen ulkopuoleen saattaa ilmaantua vaurioita.
- Ellei leukatuen paperia käytetä, desinfioi leukatuki jokaista potilasta varten samalla tavalla kuin mitä otsatuelle tehdään.

Käyttöympäristö

- Käytä, säilytä ja kuljeta tuotetta ympäristössä, joka täyttää seuraavat ehdot. Käytä alkuperäispakkausta sen säilyttämiseen tai kuljettamiseen.

	Lämpötila	Kosteus	Ilmanpaine
Käyttöympäristö	10 – 35 °C	Suhteellinen kosteus 30 – 90 % (ei kondensaatiota)	600 – 1 060 hPa
Säilytys- ja kuljetusympäristö	–30 – 50 °C	Suhteellinen kosteus 10 – 95 % (ei kondensaatiota)	600 – 1 060 hPa

- Älä asenna, säilytä tai jätä tuotetta erittäin kuumaan tai kosteaan ympäristöön. Älä myöskään käytä tuotetta ulkona. Tällainen toimenpide saattaa aiheuttaa ongelmia tai toimintahäiriöitä.
- Pyri aina pitämään huone mahdollisimman puhtaana. Useiden vuosien käytön jälkeen huoneessa leijuva pöly saattaa päätyä objektiivilinssiin ja mittausyksikön sisällä oleviin optisiin osiin. Hyviä kuvia ei pystytä ottamaan, jos laitteisto on pölyinen.
- Kun tuotetta ei käytetä, kiinnitä objektiivilinssin suojuks ja aseta pölysuojus tuotteen päälle.

Asennus

- Pyydä myyntiedustajaa tai paikallista Canon-jälleenmyyjää asentamaan se.
- Käytä toimitukseen kuuluvaan ferriittisydämeen kiinnitettyä USB-kaapelia. Pyydä myyntiedustajaa tai paikallista Canon-jälleenmyyjää kiinnittämään ferriittisydän. Käytä lisäksi enintään 2 metrin pituista USB-kaapelia.
- Kiinnitä datakaapeli toimitukseen kuuluvalla nippusiteellä ja kaapelin kiinnitysjalustalla. Pyydä myyntiedustajaa tai paikallista Canon-jälleenmyyjää kiinnittämään datakaapeli. Käytä lisäksi enintään 2 metrin pituista datakaapelia.
- Tuotteeseen kohdistuva voimakas isku saattaa muuttaa sen suuntausta. Käsittele yksikköä varovasti.

Hävittäminen

Tuotteen hävittäminen laittomalla tavalla saattaa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Näin ollen, kun tuotetta hävitetään, on ehdottomasti toimittava kunkin alueen soveltuvia lakeja ja määräyksiä vastaavan menettelytavan mukaisesti.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle



Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) ja kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja siitä, minne tuote voidaan viedä kierrätettäväksi, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämäsi jätehuoltoyhtiöön tai tuotteen ostopaikkaan.

Yllä mainitut tiedot, mukaan lukien paristoja koskevat tiedot, ovat sivustollamme kunkin EU-maan virallisilla kielillä.

Käy osoitteessa <https://global.canon/en/ifu/medcom/envfile/weee-battery-eu.pdf>.

Ohjelmisto

- (1) Pyydä myyntiedustajaa tai paikallista Canon-jälleenmyyjää asentamaan ja päivittämään tämä ohjelmisto ja ajurit.
- (2) Tarkista tietokoneen ja Windows-ohjelmiston käyttöohjeet vastaavista käyttöoppaista.
- (3) Tätä ohjelmistoa voivat käyttää vain käyttäjät, joilla on [Users (käyttäjät)]- tai [Administrators (ylläpitäjät)]-oikeudet.
- (4) Kun seuraavia toimenpiteitä ollaan suorittamassa, salli aseman/kansion ominaisuuksien [Security (turvallisuus)]-välilehdellä vaihtoehto [Modify (muokkaa)] [Users (käyttäjät)]-ryhmälle ja vaihtoehto [Full control (täysi hallinta)] [Administrators (ylläpitäjät)]-ryhmälle.
 - Lisää kiintolevy [Storage Management (tallennustilan hallinta)] -näyttöruudussa.
 - Lähetä DICOM-, JPEG- ja BMP-dataa.
 - Tuo potilastietojen CSV-tiedostoja.
 - Vie verkkokalvokuvia.
 - Tee datan varmuuskopiointi varmuuskopioasemalle.
 - Tuo ja vie tutkimusdataa.
- (5) Älä käytä [Switch User (vaihda käyttäjää)] -toimintoa (joka vaihtaa käyttäjiä ulos kirjautumatta) Windowsissa. Kun kaksi tai useampi käyttäjä käyttää tätä ohjelmistoa, muista valita [Log Off (kirjoittaudu ulos)] ja kirjaudu sitten uudestaan eri käyttäjänä.

- (6) Muista asettaa näytönsäästäjä, virranhallintavaihtoehdot ja fonttiasetukset alla näytetyllä tavalla.


Kohdat	Asetukset
Näytönsäästäjä	Ei mitään
Laita näyttö pois päältä	Ei koskaan
Laita tietokone lepotilaan	Ei koskaan
Laita kiintolevyt pois päältä	Ei koskaan
Kun virtapainiketta painetaan	Sulje
Käynnistysvalikon virtapainike	Sulje
Fonttikoko	Pienempi – 100 % (oletus)

- (7) Älä aseta Windows-tietokonetta lepotilaan tai horrostilaan.
- (8) Jos sovellusvirhe ilmenee tai ohjelmisto jumiutuu käytön aikana, toimi alla olevan ohjeen mukaisesti.
 - 1) Katkaise tietokoneen virta.
 - 2) Katkaise tämän tuotteen virta.
 - 3) Kytke virta tähän tuotteeseen.
 - 4) Kytke virta tietokoneeseen.
- (9) Älä tee päivityksiä ja parannuksia Windowsiin tämän ohjelmiston ollessa käynnissä. Windowsin päivittämisen tai parantelun aikana tämä ohjelmisto saattaa toimia hitaasti tai ei välttämättä toimi ollenkaan.

Tuoteselosteet

OCT-laitteeseen kiinnitetyt tuoteselosteet ja merkit näkyvät alla.

Noudata tuoteselosteessa olevia tietoja, jotta OCT-laitteen käyttö olisi asianmukaista.

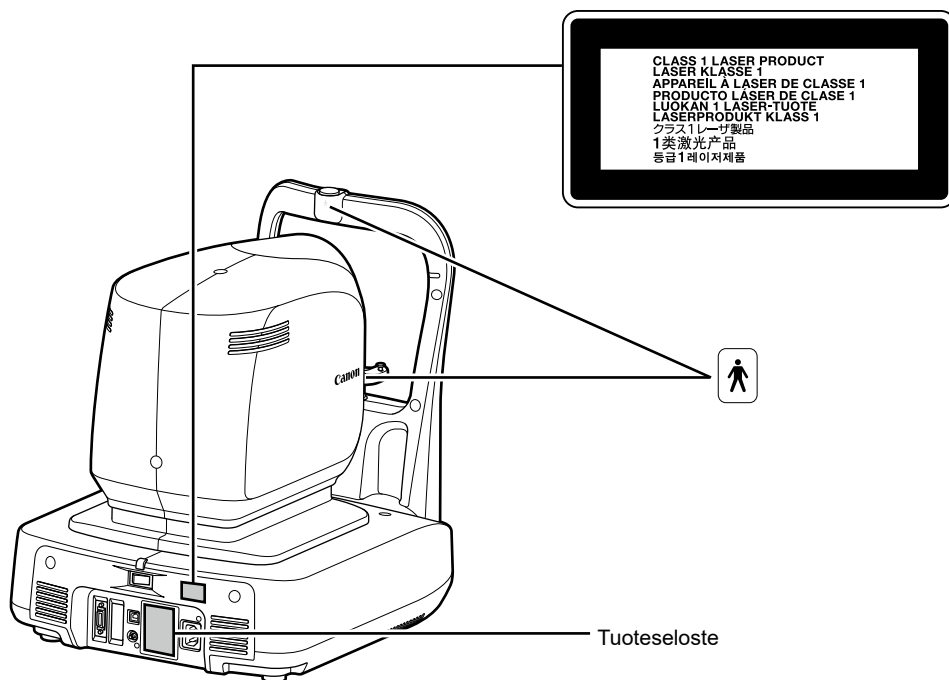

Seuraava taulukko kuvaa tässä tuotteessa olevia merkkejä ja merkintöjä.

	Vaihtovirta
	B-tyypin sovellettu osa
	Katso neuvoa käyttöohjeista
	Tämä symboli tarkoittaa asetuksen (EU) 2017/745 mukaista lääkinnällistä laitetta.
	WEEE-direktiivin (sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin) piiriin kuuluva tuote vaatii erilliskeräyksen. Direktiivi on voimassa ainoastaan Euroopan unionissa.
	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
	Valmistaja
	Sarjanumero
	Valmistuspäivämäärä

3 Perustoiminta

Kuvakaappauksen valmisteleminen

Tuotteen valmisteleminen

- 1 Irrota pölysuoja ja objektiivilinssin suojus.
- 2 Työnnä virtapistoke kokonaan verkkovirtapistorasiaan.
- 3 Kytke virta tuotteeseen.
- 4 Kytke virta tuotteeseen.
- 5 Kytke virta tietokoneeseen ja monitoriin.
- 6 Syötä käyttäjätunnus ja salasana ja napsauta sitten [Log In (kirjoittaudu sisään)] -painiketta.

Potilastietojen syöttäminen

- 1 Syötä uuden potilaan potilastunnus.
- 2 Syötä muut potilastiedot.
- 3 Napsauta [OCT Capture (OCT-kuvakuvaus)] -välilehteä.

Potilaiden valmisteleminen

- 1 Desinfioi otsatuki ja vaihda leukatuen paperi uuteen.
- 2 Ohjeista potilasta tuotteen edessä istumiseen.
- 3 Säädä leukatuen korkeutta.

Tomografisten kuvakaappausten ottaminen

Tutkimusjoukon valitseminen

- 1 Napsauta [R]-painiketta.
- 2 Napsauta automaattisen säätötilan painiketta.
- 3 Valitse [Macula Disease (makulasairaus)] -tutkimussarja luetteluudusta.
- 4 Tarkastele pupillia.
- 5 Napsauta [Start (aloita)]-painiketta.

Kuvakaappausten ottaminen

- 1 Varmista, että kuvanlaatuilmaisen väri on muuttunut vihreäksi.
- 2 Varmista, että OCT-reaaliaikakuvien ylä- ja alareunat ilmestyvät näkyviin.
- 3 Säädä kerroskuvan kallistusta.
- 4 Napsauta kohtaa [Capture (kaappaa kuva)].

Kaapattujen kuvien tarkistaminen

- 1 Napsauta [OK (kunnossa)]- tai [NG (ei kunnossa)] -painiketta.

Raporttien tarkasteleminen

Raporttien tarkasteleminen

- 1 Kun kuvakaappaus on saatu valmiiksi, napauta [Report (raportti)] -välilehteä.

Raporttien lähettäminen ja tulostaminen

- 1 Napsauta kohtaa [Output (tuloste)].
- 2 Valitse lähetyskohde ja napauta sitten [OK (kunnossa)]-painiketta.

Tuotteen sulkeminen

- 1 Napsauta [Log out (kirjaudu ulos)] -painiketta.
- 2 Napsauta [Shutdown (sulje)]-painiketta.
- 3 Katkaise tuotteen virta.
- 4 Irrota virtapistoke verkkovirtapistorasiasta.
- 5 Kiinnitä objektiivilinssin suoja ja aseta pölysuoja tuotteen päälle.

Varmuuskopiointi ja palautus

Suorita [Backup and restore (tee varmuuskopio ja palauta)] -näyttöruudussa potilastietojen ja ohjelmistolla hankitun tutkimusdatan varmuuskopiointi ja palautus. Varmuuskopiointi voidaan suorittaa joko automaattisesti tai manuaalisesti. Automaattisessa varmuuskopiointissa voidaan asettaa varmuuskopiointiaikataulu. Jos tietokannassa ilmenee ongelma, palauta potilastiedot ja tutkimusdata. Kun valitset [Local (paikallinen)] kohdasta [Database (tietokanta)], [Backup and restore (tee varmuuskopio ja palauta)] voidaan asettaa.

Levyaseman asettaminen varmuuskopiointia varten

Syötä varmuuskopiointin kohdepolku kohtaan [Backup destination (varmuuskopiointin kohde)] tai napsauta [Browse (selaa)]-painiketta varmuuskopiointikohteen valitsemiseksi.

Automaattiset varmuuskopiointiasetukset

Valitse viikonpäivä, jolloin automaattinen varmuuskopiointi suoritetaan, ja valitse varmuuskopiotyyppi luetteluudusta.

- [Full Backup (täydellinen varmuuskopiointi)]: varmuuskopioi kaiken datan.
- [Incremental Backup (lisäävä varmuuskopiointi)]: varmuuskopioi vain datan, joita on muokattu edellisestä varmuuskopiosta.

Valitse automaattisen varmuuskopiointin ajankohta luetteluudusta.

Jos [At Exit (poistumisen yhteydessä)] on valittuna, varmuuskopiointi tehdään, kun RX Capture for OCT-A1/RX -palvelimelta poistutaan.

Vanha varmuuskopiointiloki poistetaan koko varmuuskopiointin onnistuttua. Tallenna vanha varmuuskopiointiloki poistamalla rasti [Delete all old logs after succeeding to full backup (poista kaikki vanhat lokit täydelliseen varmuuskopiointin onnistuttua)] -valintaruudusta.

Manuaalinen varmuuskopiointi

Napsauta kohtaa [Full Backup (täydellinen varmuuskopiointi)] tai [Incremental Backup (lisäävä varmuuskopiointi)].

Varmuuskopiointi alkaa.

Peruuta varmuuskopiointi napsauttamalla [Cancel (peruuta)]-painiketta.

Varmuuskopiointilokin näyttäminen

Kun [Backup Logs (varmuuskopiointilokit)] -välilehteä napsautetaan, varmuuskopiointilokin luettelo ilmestyy näkyviin.

Datan palauttaminen

Datan palauttamisella datan tila voidaan palauttaa valitun varmuuskopiointilokin tasolle.

1 Valitse varmuuskopiointiloki ja napsauta sitten [Restore (palauta)]-painiketta.

Esimerkiksi, jos palautat varmuuskopiointilokin 16.5.2012, tilanteeksi palautuu 16.5.2012. Sen vuoksi 17.5.2012 ja sen jälkeen hankitut potilastiedot ja tutkimusdata pyyhitään.

Palauttaminen alkaa.

Kun edistymispalkin näyttävä näyttöruutu katoaa, palautus on saatu valmiiksi.

4 Kunnossapito

Päivittäiset tarkastukset

Varmista, että tuotetta käytetään turvallisesti ja oikein tekemällä seuraavat tarkastukset ennen sen käyttöä. Jos tarkastuksen aikana löytyy ongelma etkä pysty korjaamaan sitä, ota yhteyttä myyntiedustajaan tai paikalliseen Canon-jälleenmyyjään.

Virran kytkemistä edeltävät tarkistukset

Tarkista seuraavat kohdat ennen virran kytkemistä.

- 1) Virtajohto ja liitäntäkaapeli eivät ole vaurioituneita eikä niiden eristys ole revennyt.
- 2) Virtajohto on työnnetty kokonaan ja pitävästi tuotteessa olevaan verkkovirtaliitäntään ja verkkovirtapistoraasiaan.
- 3) Tuotteen ulkopuoli ei ole vaurioitunut tai löysä.
- 4) Objektiivilinssissä ei ole naarmuja tai likaa. Puhdista objektiivilinssi, jos se on likainen.
- 5) Tietokoneen monitorissa ei ole likaa. Puhdista tietokoneen monitori, jos se on likainen.

Virran kytkemisen jälkeiset tarkistukset

Kytke virta tähän tuotteeseen ja sen jälkeen tietokoneeseen. Tarkista seuraavat kohdat sisäänkirjautumisen jälkeen.

- 1) VIRRAN (POWER) merkkivalo palaa.
- 2) Leukatuki liikkuu sujuvasti ylös- ja alaspäin, kun [Chin Rest (leukatuki)] -painiketta napsautetaan.
- 3) Mittausyksikkö liikkuu sujuvasti ylös- ja alaspäin, kun etulohkon kuvaa napsautetaan.
- 4) Mittausyksikkö liikkuu sujuvasti eteen- ja taaksepäin, kun [Z Adjustment (Z-säätö)] -painiketta napsautetaan.
- 5) SLO-reaaliaikakuvaa voidaan tarkastella, kun [Start (aloita)] -painiketta napsautetaan.

Tuotteen siirtäminen

- 1 Katkaise tietokoneen virta.
- 2 Katkaise tuotteen virta.
- 3 Irrota tuotteen tietokoneeseen liittävä USB-kaapeli.
- 4 Kytke virta tuotteeseen.
- 5 Katkaise tuotteen virta.
- 6 Muista irrottaa pistoke verkkovirtapistorasiasta ja kytkeä kaikki muihin laitteisiin liitetyt kaapelit irti.
- 7 Tämän tuotteen siirtämiseen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä.

Puhdistaminen ja desinfiointi

Objektiivilinssi

Jos objektiivilinssi on likainen, puhdista se alla olevan menettelyohjeen mukaisesti.

- 1 **Tarkista lian varalta.**
Valaise objektiivilinssiä kynälampulla mahdollisen likaisuuden tarkistamiseksi.
- 2 **Puhalla pois mahdollinen pöly tai lika.**
Käytä puhallinta kaiken pölyn ja lian poistamiseen linssistä. Älä käytä harjaa pölyn poistamiseen.
- 3 **Pyyhi objektiivilinssi.**
 - 1) Pyyhi objektiivilinssi kevyesti linssinpuhdistuspaperilla, joka on kostutettu linssinpuhdistusaineella.
 - 2) Aloita linssin keskeltä ja pyyhi linssiä kierteisesti reunoja kohti.
 - 3) Vaihda linssin puhdistuspaperi ja pyyhi objektiivilinssiä, kunnes lika on poissa eikä linssissä ole raitoja.

Otsatuki/leukatuki

Puhdista aiotut osat desinfioidulla sideharsolla tai vastaavalla desinfiointiaineeseen kostutetulla materiaalilla.

Ulkopinta

Jos tuotteen ulkopuoli on likainen, puhdista se alla olevan menettelyohjeen mukaisesti.

- 1 **Katkaise tuotteen virta.**
Käännä virtakytkin pois-asentoon ja irrota virtajohto verkkovirtapistorasiasta.
- 2 **Pyyhi puhdistusaineessa liotetulla liinalla.**
Pyyhi laimeassa neutraalissa puhdistusaineessa liotetulla ja hyvin puristetulla pehmeällä liinalla.
- 3 **Pyyhi vedessä liotetulla liinalla.**
Pyyhi vedessä liotetulla ja hyvin puristetulla liinalla.

Liite

Tekniset tiedot

OCT-kuva

OCT-kuva on tomogrammikuva, joka kaapataan asetetun skannaustilan mukaisesti.

Resoluutio	Syvyys (Z-suunta): 3 µm tai sitä vähemmän Leveys (X-Y-suunta): 20 µm tai sitä vähemmän
Skannausnopeus	70 000 (0/-1 000) A-skannausta sekunnissa
Skannausalue	3 (H) × 3 (V) – 13 (H) × 10 (V) mm (±0,1 mm)
Valonlähde	SLD 855 (±5) nm

SLO-kuva

SLO-kuva on hyödyllinen silmän etuosan tarkasteluun, fiksaatioasennon varmistamiseen ja kuvakaappausalueen varmistamiseen SLO-kuvan avulla.

Skannaustila	Konfokaalinen laserskannaustila
Katselukulma	45 astetta (H) × 34 astetta (V) (13 × 10 mm)
Resoluutio	25 µm
Valonlähde	LD 780 nm

Virtalähteen luokitus	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 3,7–1,6 A
-----------------------	-----------------------------------

Analyysityypit

Makulan paksuusanalyysi

Tämä näyttää makulan kerroskuvan ja verkkokalvon paksuuden analyysitulokset.

NFL+GCL+IPL-analyysi/GCL+IPL-analyysi

Tämä näyttää kerroskuvan makulasta näköhermon papillaan asti ja verkkokalvon paksuuden analyysitulokset.

Näköhermon papillan analyysi

Tämä näyttää RNFL:n (verkkokalvon hermosäiekerroksen) paksuuden ja näköhermon papillaan muodon analyysitulokset.

Laaja 3D-skannausanalyysi

Tämä skannaa makulan ja näköhermon papillan kerran ja näyttää sitten analyysitulokset.

2D-kerroskuva-analyysi

Tämä näyttää kerroskuvan ja määritetyn osan verkkokalvon paksuuden.

Yleinen kerroskuva-analyysi

Tämä näyttää kerroskuvan ja määritetyn osan verkkokalvon paksuuden.

OCTA-kuvat

Tämä näyttää alueen tiheyden ja luuston tiheyden OCTA-tomogrammikuvat ja analyysitulokset.

3D-analyysi

Tämä näyttää 3D-kerroskuvan.

Silmän etuosa -lohkon analyysi

Tämä näyttää silmän etuosa -lohkon kerroskuvan ja sarveiskalvon paksuuden analyysitulokset.

EMD (sähkömagneettiset häiriöt)

Tämä tuote on suunniteltu ja testattu niin, että se noudattaa IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2) -standardia, joka sisältää lääkintälaitteiden sähkömagneettisten häiriöiden (EDM:n) yhteydessä sovellettavat säädökset, ja se on asennettava ja otettava käyttöön seuraavien tietojen mukaisesti.

1. Lääkinnällinen sähkölaitteisto edellyttää erityisiä varotoimia EMD:n suhteen, ja se on asennettava ja otettava käyttöön käsikirjan sisältämien tietojen mukaisesti.
2. Tämä tuote soveltuu käytettäväksi sairaalaympäristöissä (ammattimaiset terveydenhuoltolaitokset), lukuun ottamatta aktiivisen HF-KIRURGISEN LAITTEISTON tai magneettiresonanssikuvaukseen tarkoitettujen ME-JÄRJESTELMÄN RF (radiotaajuus) -suojattujen huoneiden läheisiä ympäristöjä, joissa SÄHKÖMAGNEETTISET HÄIRIÖT ovat voimakkaita.
3. Jotta optimaalinen EMD-suorituskyky pysyisi yllä, käytä vain määrättyjä kaapeleita.

Nimi	Tyyppi	Pituus	Huomautukset
Verkkovirtajohto	Suojaamaton	3,0 m:n kiinteä pituus	Mukana toimitettu
Synkronointikaapeli	Suojattu	2,0 m	Mukana toimitettu
USB-kaapeli	AB-tyypin liitinpistoke, joka tukee USB 2.0 Hi-Speed -standardia	Enint. 2,0 m	Ei toimiteta mukana
Datakaapeli	Suojattu	2,0 m	Mukana toimitettu

4. VAROITUS:
Muiden kuin Canonin myyntiedustajan tai paikallisen Canon-jälleenmyyjän täsmentämien tai toimittamien lisävarusteiden, muuntimien ja kaapeleiden käyttö voisi lisätä tämän laitteiston sähkömagneettisia päästöjä tai heikentää sen sähkömagneettista häiriönsietoa ja johtaa virheelliseen toimintaan.
5. VAROITUS:
Tämän laitteiston käyttöä muiden laitteiden vieressä tai niiden kanssa pinottuna tulisi välttää, sillä se voisi saada aikaan virheellistä toimintaa. Jos tällainen käyttö on välttämätöntä, tätä laitteistoa ja muita laitteita tulisi tarkkailla niiden normaalitoiminnan varmistamiseksi.
6. VAROITUS:
Kannettavaa RF-viestintälaitteistoa (mukaan lukien oheislaitteet, kuten antennikaapelit ja ulkoiset antennit) ei tulisi käyttää 30 cm (12 tuumaa) lähempänä mitään tämän tuotteen osaa, mukaan lukien Canonin myyntiedustajan tai paikallisen Canon-jälleenmyyjän täsmentämät kaapelit. Muuten tämän laitteiston suorituskyky voisi heikentyä.
7. Olennainen suorituskyky (sähkömagneettisia häiriöitä vastaan)
Lasertehon tai lasersäteen säteilytystason valvominen
Jos laserin valvontatoiminto kohtaa vian tai toiminnallisuuden menetyksen, tämä tuote ilmoittaa käyttäjälle molemmista tilanteista äänimerkillä ja viestillä.
8. Sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi asiakkaan tai tämän tuotteen käyttäjän on ehkä tehtävä mittausta uudestaan tai käynnistettävä laitteisto, ohjelmisto tai tietokone uudelleen.

Sähkömagneettinen päästö

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi alla eritellyissä sähkömagneettisessa ympäristössä.

Asiakkaan tai tämän tuotteen käyttäjän tulisi varmistaa, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä.

Päästötesti	Vaatimustenmukaisuus	Sähkömagneettinen ympäristö – Ohjeistus
RF-päästöt EN 55011 CISPR11	Ryhmä 1	Tuote käyttää RF-energiaa vain sisäiseen toimintoonsa. Sen vuoksi sen RF-päästöt ovat hyvin alhaiset eivätkä todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähellä olevalle sähkömagneettiselle laitteistolle.
RF-päästöt EN 55011 CISPR11	Luokka B	Tuote soveltuu käytettäväksi kaikissa laitoksissa, mukaan lukien kotitaloudet ja ne, jotka on kytketty suoraan julkiseen pienjännitesähköverkkoon, joka syöttää sähköä kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin rakennuksiin.
Harmoniset päästöt EN IEC 61000-3-2	Luokka A	
Jännitevaihtelu/ välkyntäpäästöt EN IEC 61000-3-3*	Täyttää vaatimukset	

* Ei koske alueita, joissa nimellisjännite on alle 220 V.

Takuu- ja korjauspalvelu

Käyttöikä

Tämän tuotteen käyttöikä on kahdeksan vuotta, jos määritetyt tarkastukset ja huollot suoritetaan.

Tekninen kuvaus

Tekninen kuvaus on katsottavissa tuotteen käyttöoppaasta.

Canon

Valmistaja:



CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani

Puhelin: (81)-3-3758-2111