



Optikai koherencia tomográfia
Optical Coherence Tomography

OCT-A1

Használati útmutató

Fontos

- Az orvostechnikai eszköz használatáért és karbantartásáért a felhasználó felel. Javasoljuk, hogy a karbantartást bízza egy kijelölt személyre, aki gondoskodik a termék megfelelő állapotáról és biztonságos használatáról.
- A terméket üzemeltető rendszer hálózathoz csatlakoztatása kockázatot jelenthet a betegekre, a kezelőkre vagy harmadik felekre nézve. A karbantartásért felelős kijelölt személynek előzetesen fel kell mérnie ezeket a kockázatokat.

Amennyiben a hálózathoz történő csatlakoztatás után változások történtek a hálózaton (például módosították a hálózat konfigurációját, eszközökkel bővítették a hálózatot vagy eszközöket távolítottak el a hálózathoz, illetve frissítették vagy bővítették a hálózathoz csatlakoztatott berendezéseket), a felelős személynek újból fel kell mérnie a kockázatokat.

Kezelői profil

- Ezt a terméket kizárólag olyan orvos vagy jogilag alkalmas, szakképzett személy használhatja, aki rendelkezik általános szemészeti ismeretekkel, és képes értelmezni a jelen kézikönyvben leírtakat.

Beteg célcsoport

- Bármilyen nemű gyermek és felnőtt betegek (beleértve a várandós és szoptató nőket), akik felvételkedés közben képesek a fejüket a homloktámasznak és az álltámasznak támasztva tartani, és akiknél nem áll fenn ellenjavallat.

Javallatok

- A termék a retina, a retinális idegrostréteg és a látóidegfő in-vivo képalkotására szolgál, hogy képi információt nyújtson olyan betegségek diagnosztizálásához, mint a glaukóma, a diabéteszes retinopátia vagy az időskori makuladegeneráció.

1. Bevezetés

Áttekintés

A termék nem invazív módon, teljesen automatikus pozicionálással digitális felvételeket készít a retina szerkezetéről és tomográfiás felvételeket a beteg szeméről.

A teljesen automatikus működés csökkentheti a vizsgálat idejét, az automatikus szemkövetés pedig lehetővé teszi a nagy reprodukálhatóságú felvételek készítését.

Használati javallatok

A termék egy optikai koherencia tomográfiai rendszer, amely a retina, a retinális idegrostréteg és a látóideg fő in-vivo képalkotására és mérésére szolgál.

Ez a normatív adatbázisokkal rendelkező termék egy kvantitatív eszköz, amely összehasonlítja a humán retina retinális idegrostrétegét és a makulát egy ismert egészséges alanyok adatait tartalmazó adatbázissal.

A termék segédeszközként használható a hátsó szegmentum betegségeinek diagnosztizálásához és kezeléséhez.

A Canon OCT-A1 nem használható a betegségek diagnosztizálásának egyetlen eszközeként. A más műszerekkel végzett egyéb mérési eredményeket is figyelembe vevő, végleges diagnózis felállításáért a szakorvos felel.

Ellenjavallat

Ne használja a terméket olyan betegeknél, akik:

- Kórelőzményében szerepel a fényérzékenység.
- Rövid időn belül fotodinamias terápian (PDT) estek át (a tilalmi időszakra vonatkozóan lásd az alkalmazott fényérzékenyítő anyag betegájékoztatóját).
- Olyan gyógyszert szednek, amelynek mellékhatásai fényérzékenységet okozhatnak.

A termék részei

A termék részei

- OCT-A1
- Tápkábel
- Szinkronkábel
- RX Capture for OCT-A1 szoftver

Opcionális termékek

- ASA-1 elülső szegmentum adapter
- EL-1 külső fixációs lámpaegység
- RX szerverszoftver (licenc)
Szerverszoftver
- RX képnéző szoftver (licenc)
Képnéző szoftver
- OCT angiográfia (licenc)
OCT angiográfiás felvételt készítésre szolgáló funkció.
- OCTA2 (licenc)
OCTA felvételekhez használható, nagy látószögű, nagy felbontású, átlagoló és panoráma funkció.
- OCTA elemzés (licenc)
OCTA felvételekhez használható, képelemző és számszerűsítő funkció.
- Intelligens képzajszűrés (licenc)
OCTA felvételekhez használható, képzajcsökkentő funkció.

A szoftverek működési környezete

A vezérlő számítógép, a monitor, a billentyűzet, az egér, a nyomtató és a leválasztó transzformátor általános célú berendezések.

Minden eszköznek meg kell felelnie az alábbi specifikációknak.

Hardver vagy szoftver	Specifikációk
CPU	Intel processzorok (legalább 6 magos)
RAM	Legalább 16 GB Legalább 32 GB (amikor az OCTA vizsgálatoknál engedélyezett a progresszió elemzése) Legalább 64 GB (amikor telepítve van az OCTA 2)
GPU	A Compute Capability 5.0 vagy magasabb követelménynek megfelelő NVIDIA videokártya (a Quadro K2200-nál nagyobb teljesítményű grafikus kártyák és legalább 4 GB videomemória)
Kijelző	Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 képpont Képernyő színmélysége: Legalább 24 bites
Merevlemez	Legalább 2 TB: RAID-1 (tükrözés); helyi szerver esetén (amikor az RX szerver még nem került bevezetésre) Legalább 100 GB: Távoli szerver esetén (az RX szerver bevezetése után)
Interfész	USB 2.0
Hálózat	Legalább 1000BASE-T
Operációs rendszer	Microsoft Windows 11 Pro 23H2-es verzió (64 bites)* Microsoft Windows 11 Pro 24H2-es verzió (64 bites)*
Alkalmazásszoftver	Microsoft .NET Framework 4.8-as verzió SQL Server 2019 Express US verzió (64 bites) • Amikor telepítve van az intelligens képajcsökkentés, illetve GPU-alapú feldolgozás használatakor NVIDIA CUDA Toolkit 11.7
Camera Link képalkotó kártya	AVALDATA APX-3323
Egér	Görgős egér

* Érintőképernyős műveletek nem támogatottak.

2. Biztonság

Szabályozói információk

Az eszköz besorolása

Áramütés elleni védelem típusa

1. érintésvédelmi osztályba sorolt berendezés

Áramütés elleni védelem foka

B típusú alkalmazott alkatrészek
(álltámasz és homloktámasz)

CE-jelölés

A termék megfelel az alábbiaknak:

- (EU) 2017/745 rendelet
- 2011/65/EU irányelv

Európai uniós felhasználók számára

Súlyos váratlan események bejelentése

A termékkel kapcsolatban előforduló minden súlyos váratlan eseményt (meghatározását lásd az (EU) 2017/745 rendelet 2. cikkének (65) bekezdésében) jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Digitális használati útmutató

A használati útmutatót ügyfeleink megtekinthetik és letölthetik a weboldalunkon.

- <https://global.canon/en/ifu/medcom/index.html>

Részletekért forduljon értékesítési tanácsadójához vagy a helyi Canon forgalmazóhoz.

Biztonsági óvintézkedések

A sérülések és az adatvesztés elkerülése érdekében megfelelően, a biztonsági óvintézkedések betartásával üzemeltesse a terméket.

Ne érintse meg egyszerre a nem orvostechnikai eszközök vezetőképes alkatrészeit és a beteget.

Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

A termék nem használható a betegségek diagnosztizálásának egyetlen eszközeként.

A más műszerekkel végzett egyéb elemzések eredményeit is figyelembe vevő, végleges diagnózis felállításáért a szakorvos felel.

Ne hagyjon alkoholt, hígítót vagy gyúlékony vegyszert az eszköz közelében.

Ne helyezzen gyúlékony oldószert az eszköz közelébe. Tűz keletkezhet, ha a kiömlött vagy elpárolgott oldószer érintkezésbe kerül a belső elektromos alkatrészekkel. Egyes fertőtlenítőszeresek gyúlékonyak. Használatuk során elővigyázatosan járjon el.

Amennyiben egy beültetett elektronikus orvostechnikai eszközzel rendelkező felhasználó rendellenességet tapasztal az eszköz használata közben, maradjon biztonságos távolságban az előtétlencsétől.

Az előtétlencse mágneseket tartalmaz. Amennyiben egy beültetett elektronikus orvostechnikai eszközzel rendelkező felhasználó rendellenességet tapasztal az eszköz használata közben, maradjon biztonságos távolságban az előtétlencsétől.

Ne helyezze az eszközt víznek, gőznek, nedvességnek vagy pornak kitett helyre.

Ez ugyanis problémákat vagy meghibásodást idézhet elő.

Ne helyezze az eszközt sónak, kénnek vagy korrozív gáznak kitett helyre.

Ez ugyanis az eszköz korrózióját okozhatja, illetve problémákat vagy meghibásodást idézhet elő.

Ne helyezze az eszközt instabil vagy rezgésnek kitett helyre.

A rezgés felboríthatja az eszközt, illetve az eszköz instabillá válhat és leeshet, ami meghibásodást vagy sérülést idézhet elő.

Ne helyezze a kezét vagy az ujjait az álltámasz alá, illetve a mérőegység közelébe.

Ellenkező esetben becsípődhetnek és megsérülhetnek kezei vagy ujjai.

Hasonlóképpen a beteget is utasítsa arra, hogy tartsa távol a kezét az álltámasz aljától és a mérőegység környékétől.

Ne helyezze a kezét vagy az ujjait a mérőegység és az alapzat közé.

Ellenkező esetben becsípődhetnek és megsérülhetnek kezei vagy ujjai, amikor a mérőegység valamely irányba elmozdul. Hasonlóképpen a beteget is utasítsa arra, hogy ne helyezze a kezét vagy az ujjait a mérőegység és az alapzat közé.

Áthelyezésekor ne az arctámasznál vagy a mérőegységnél fogva tartsa a terméket.

Áthelyezésekor az alapzaton kialakított mélyedéseknél fogva emelje fel a terméket, és tartsa vízszintesen. Ne az arctámasznál vagy a mérőegységnél fogva tartsa, mivel ezek leválhatnak, ami sérülést okozhat.

Győződjön meg arról, hogy a teljes rendszer megfelel az IEC 60601-1 szabványnak.

A betegek környezetében használjon az IEC 60601-1 szabványnak megfelelő berendezéseket.

A betegek környezetében olyan számítógépet és monitort használjon, amely megfelel a termékre vonatkozó IEC 60601-1 rendszerszabványnak. Az IEC 62368-1 szabványnak megfelelő számítógép és monitor is használható. Azonban mindenképpen használjon leválasztó transzformátort. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye. Részletekért forduljon értékesítési tanácsadójához vagy a helyi Canon forgalmazóhoz.

Ügyeljen a homloktámasz és az álltámasz tisztaságára.

A fertőzésveszély elkerülése érdekében minden beteg után törölje át a homloktámaszt etanolos fertőtlenítőszerrel. Szintén a fertőzésveszély megelőzése érdekében minden beteg után cserélje ki az álltámaszra helyezett papírt.

A fertőtlenítés módjával kapcsolatos tájékoztatásért forduljon szakemberhez. A homloktámasz korrodálódhat, ha a fent említettől eltérő fertőtlenítőszert használ.

Felvételkészítéskor lassan mozgassa a mérőegységet a páciens szeme felé.

Amikor előre-hátra irányban állítja be a mérőegység pozícióját, lassan közelítse a mérőegységet a beteghez, miközben oldalról nézi a beteg arcát.

A beteg szeme megsérülhet, ha hozzáér az objektívlencse.

A termék használata előtt készítsen próbafelvételt.

A termék használata előtt mindenképpen készítsen próbafelvételt, amelyen ellenőrizni tudja, hogy nem befolyásolja-e idegen anyag a képalkotást vagy a diagnózist.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a beteg neve, személyi azonosító száma, születési ideje és neme megegyezik a regisztrált adatokkal.

Hibás regisztrált adatok esetén előfordulhat, hogy a rendszer tévesen azonosítja a beteget. Ez téves diagnózishoz és a beteg fizikai sérüléséhez vezethet.

Az elülső szegmentum tomográfiai vizsgálata során feltétlenül helyezze fel a kiegészítő homloktámaszt és a kiegészítő álltámaszt.

Az előtétlencse felhelyezésekor megváltozik a munkatávolság. A kiegészítő homloktámasz és a kiegészítő álltámasz nélkül a beteg szeme megsérülhet, ha hozzáér a lencse.

Ne érintse meg a mérőegységet, miközben az mozog.

A termék bekapcsolásakor a mérőegység középső pozícióba áll. Ne érintse meg a mérőegységet, miközben az mozog. Ügyeljen arra, hogy a beteg ekkor ne támassza állát az álltámaszra.

A termék elcsomagolása előtt mozgassa a mérőegységet szállítási pozícióba.

Szállításhoz helyezze a terméket gyári csomagolásába.

A terméket eredeti csomagolásában szállítsa, hogy megóvja a rázkódásoktól és ütődésektől.

A rázkódások és ütődések ugyanis a termék meghibásodását vagy károsodását idézhetik elő.

Részletekért forduljon értékesítési tanácsadójához vagy a helyi Canon forgalmazóhoz.

Felvétel rögzítése, adatátvitel és biztonsági mentés közben ne kapcsolja ki a terméket vagy a számítógépet.

Ez ugyanis károsíthatja a számítógépet, vagy az adatok sérülését idézheti elő.

A szoftver futtatása közben ne módosítsa az operációs rendszer beállításait (pl. a képernyőfelbontást, dátumformátumot, dátumot és nyelvet).

Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.

Ne használja a szoftvert, amíg be nem fejeződött a felvétel importálása vagy átvitele.

Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.

Felvételkészítés és adatátvitel közben ne húzza ki a terméket és a számítógépet összekötő kábelt.

Ez ugyanis károsíthatja a számítógépet, vagy az adatok sérülését idézheti elő.

A szoftver telepítése után ne telepítsen semmilyen más szoftvert.

Kizárólag az értékesítési tanácsadója vagy a helyi Canon forgalmazó által meghatározott szoftvereket telepítse. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szoftver és a termék nem működik megfelelően.

A rendszer hálózathoz való csatlakoztatásakor a hálózat konfigurálását és kezelését bízza hálózati rendszergazdára.

Hálózati csatlakozáskor a hálózati rendszergazdának konfigurálnia kell a beállításokat, és ellenőriznie kell a hálózat megfelelő működését.

Külső adatok importálásakor végezzen vírusellenőrzést.

Amikor pendrive-ot vagy merevlemezű csatlakoztat, illetve más számítógépről importál adatokat, végezzen vírusellenőrzést. Amennyiben a számítógép megfertőződik, megsérülhetnek, vagy illetéktelen kezekbe kerülhetnek a betegadatok és a vizsgálati adatok.

Rendszeresen mentse el az adatokat egy külső tárolóeszköze.

Különben a szoftver vagy a számítógép meghibásodása esetén elérhetetlenné válhatnak a tárolt betegadatok.

Amikor nem használja a szoftvert, jelentkezzen ki.

Az illetéktelen használat megelőzése érdekében jelentkezzen ki a szoftverből, amikor nem használja.

A mérőegység beteg felé történő mozgatása közben mindenképpen kövesse figyelemmel az előtétlencse pozícióját.

A hosszan tartó szkennelés átmeneti látászavarokat okozhat a betegeknél. Biztosítson megfelelő pihenési időt a szkennelések között.

A nem megfelelő használat kellemetlenségérzetet vagy enyhe sérülést idézhet elő a betegnél. Gondosan kövesse a beteg pozicionálására és az eszköz működtetésére vonatkozó utasításokat.

A szakszerűtlen kezelés az eszköz károsodását idézheti elő. Elővigyázatosan kezelje az eszközt, és tartson be minden karbantartási utasítást.

Előfordulhatnak szoftverhibák. Szokatlan szoftverműködés esetén indítsa újra a rendszert, és forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz, ha a probléma továbbra is fennáll.

Informatikai biztonsági óvintézkedések

A rendszer hálózathoz való csatlakoztatásakor a hálózat konfigurálását és kezelését bízza hálózati rendszergazdára.
Hálózati csatlakozáskor a hálózati rendszergazdának konfigurálnia kell a beállításokat, és ellenőriznie kell a hálózat megfelelő működését.

Amikor nem használja a szoftvert, jelentkezzen ki.
Az illetéktelen használat megelőzése érdekében jelentkezzen ki a szoftverből, amikor nem használja.

Külső adatok importálásakor végezzen vírusellenőrzést.
Amikor pendrive-ot vagy merevlemez csatlakoztat, illetve más számítógépről importál adatokat, végezzen vírusellenőrzést. Amennyiben a számítógép megfertőződik, megsérülhetnek, vagy illetéktelen kezekbe kerülhetnek a betegadatok és a vizsgálati adatok.

Rendszeresen mentse el az adatokat egy külső tárolóeszköze.
Különben a szoftver vagy a számítógép meghibásodása esetén elérhetetlenné válhatnak a tárolt betegadatok.

Felvételkészítés és adatátvitel közben ne húzza ki a terméket és a számítógépet összekötő kábelt.
Ez ugyanis károsíthatja a számítógépet, vagy az adatok sérülését idézheti elő.

Felvétel rögzítése, adatátvitel és biztonsági mentés közben ne kapcsolja ki a terméket vagy a számítógépet.
Ez ugyanis károsíthatja a számítógépet, vagy az adatok sérülését idézheti elő.

A szoftver telepítése után ne telepítsen semmilyen más szoftvert.
Kizárólag az értékesítési tanácsadója vagy a helyi Canon forgalmazó által meghatározott szoftvereket telepítse. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szoftver és a termék nem működik megfelelően.

A szoftver futtatása közben ne módosítsa az operációs rendszer beállításait (pl. a képernyőfelbontást, dátumformátumot, dátumot és nyelvet).
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.

Ne használja a szoftvert, amíg be nem fejeződött a felvétel importálása vagy átvitele.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.

Lézerbiztonság

Ez a termék a 21 CFR 1. fejezetének J alfejezete szerinti 1. osztályba sorolt lézertermék, amely megfelel az Egyesült Államok Népjóléti Minisztériuma (DHHS) által az 1968. évi munka- és egészségvédelmi sugárbiztonsági törvénnyel összhangban kiadott, sugárzási teljesítményre vonatkozó szabványnak. Emellett a termék 1. osztályba sorolt lézerterméknek minősül az IEC 60825-1:2007, az IEC 60825-1:2014, az EN 60825-1:2007 és az EN 60825-1:2014 szabvány szerint. Mivel az eszköz belsejében kibocsátott sugárzás teljes mértékben a védőburkolatokon és a külső fedeleken belül marad, a lézersugár a normál felhasználói üzemeltetés egyik fázisában sem juthat ki az eszközből.

Informatikai biztonsági tájékoztató

- Felhasználóra vonatkozó követelmény

Ezt a terméket kizárólag olyan orvos vagy jogilag alkalmas, szakképzett személy használhatja, aki rendelkezik általános szemészeti ismeretekkel, és képes értelmezni a jelen kézikönyvben leírtakat.

- Alkalmazási környezet

A terméknek csatlakoznia kell a kórházi hálózathoz. Hálózati csatlakozáskor a hálózati rendszergazdának konfigurálnia kell a beállításokat, és ellenőriznie kell a hálózat megfelelő működését.

- Kockázati profil

Fennáll a lehetősége annak, hogy rosszindulatú támadás éri a rendszert, ezért mindenképpen jelentkezzen ki a szoftverből, amikor nem használja azt.

- A szoftverfrissítések és biztonsági javítások integritását/érvényesítését biztosító rendelkezések

Kérjük, adja meg elérhetőségét értékesítési tanácsadójának vagy a helyi Canon forgalmazónak, mert a megfelelő biztonsági javításokat szerviztechnikus telepíti a felhasználók számára. A gyártó a működés ellenőrzését követően tájékoztatja a szerviztechnikust a biztonsági javítások telepítésének módjáról.

- Biztonsági konfigurációs beállítások

Automatikusan konfiguráljuk a tűzfal beállításait, hogy a hálózaton keresztül senki ne férhessen hozzá a rendszerhez. A tűzfal konfigurálását alapesetben a szoftvertelepítő végzi el.

- Útmutatások a kezdeti konfigurációhoz

Új felhasználó hozzáadása után meg kell változtatni az új telepítéskor konfigurált alapértelmezett felhasználói fiók jelszavát, vagy törölni kell a fiókot. Ha ezt a lépést kihagyja, biztonsági problémák merülhetnek fel.

- Útmutatások a biztonsági frissítések telepítéséhez

Biztonsági frissítés céljából Windows-frissítéseket alkalmazunk.

- Biztonsági üzemmód

A rendszer biztonsági üzemmóddal rendelkezik, hogy hálózati hiba esetén is használható maradjon. Hálózati hiba észlelésekor a rendszer automatikusan biztonsági üzemmódba kapcsol. Biztonsági üzemmódban a vizsgálati adatokat nem a hálózaton, hanem helyileg tárolja a rendszer. A hálózati hiba megszűnését követően az eszköz kilép a biztonsági üzemmódból, és a helyileg tárolt adatok automatikusan átkerülnek a hálózati tárhelyre.

- Informatikai biztonságot érintő intézkedések

Az alábbi biztonsági beállításokat ajánljuk, és alapértelmezetten konfiguráljuk azokat. Automatikusan konfiguráljuk a Windows tűzfalat, hogy a hálózaton keresztül senki ne férhessen hozzá a rendszerhez. Engedélyezzük a Windows Defender használatát.

- Teendők informatikai biztonsággal kapcsolatos figyelmeztető üzenetek esetén

Üzenet	Megoldás
Lennie kell legalább egy rendszergazdának.	A felhasználó nem törölhető, ha csak egy személy van rendszergazdaként regisztrálva. Regisztráljon egy felhasználót rendszergazdaként, majd törölje a felhasználót.
Az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nem törölhető.	– Az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nem törölhető. A felhasználó törléséhez be kell jelentkeznie a másik rendszergazdának. – A felhasználó nem törölhető, ha csak egy személy van rendszergazdaként regisztrálva. Regisztráljon egy felhasználót rendszergazdaként, majd törölje a felhasználót.
Az adatbázis zárolása sikertelen	Miután a többi felhasználó kijelentkezett, próbálja meg újra elvégezni a műveletet.
A beteg zárolása sikertelen A beteg törlése sikertelen	Miután egy másik felhasználó megszüntette a beteg kijelölését, próbálja meg újra elvégezni a műveletet.

- Biztonsági mentési és visszaállítási funkciók

(lásd: 22. oldal)

Használatra vonatkozó megjegyzések

Használat előtt

- Naponta vizsgálja át a terméket. Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs jelen olyan idegen anyag, amely befolyásolhatja a képalkotást vagy a diagnózist.
- Az objektívlencsén lévő szennyeződések és karcolások fekete pontként jelennek meg, ami befolyásolhatja a képminőséget. Felvét elkészítés előtt ellenőrizze és tisztítsa meg az objektívlencsét.
- A helyiség hirtelen felfűtése télen vagy hideg éghajlaton páralecsapódást okozhat az objektívlencsén vagy a termék belső optikai alkatrészein, ami megakadályozhatja az optimális felvét elkészítést. Ez esetben felvét elkészítés előtt várja meg, amíg felszárad a pára.

Használat után

- A termék használata után kapcsolja ki a tápellátást, rögzítse az objektívsapkát, hogy megóvja az objektívlencsét a portól, és helyezze fel a termékre a porvédő huzatot. Poros objektívlencsével nem lehet jó minőségű felvételeket készíteni.

Tisztítás és fertőtlenítés

- Ügyeljen arra, hogy a portalanító pumpa ne érjen hozzá a lencséhez.
- Ne próbálja meg letörölni vagy ledörzsölni a lencsére tapadt szennyeződést és port.
- Ne használjon a lencse törléséhez etanolos oldatot, szemüvegtisztítót vagy szilikonbevonatú papírt. Ellenkező esetben károsodhat a lencse felülete, vagy csíkok maradhatnak rajta.
- Ne tisztítsa a termék külső felületét lencsetisztítóval. Ez ugyanis károsíthatja a termék külső felületét.
- A termék külső felületének tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, hígítót vagy más oldószert. Ez ugyanis károsítja a termék külső felületét.
- A homloktámasz és az álltámasz kivételével ne használjon etanolos oldatot a termék külső felületének tisztításához. Ellenkező esetben károsodhat a termék külső felülete.
- Ha nem használ álltámaszt védő papírt, minden beteg után fertőtlenítsa az álltámaszt a homloktámaszhoz hasonló módon.

Alkalmazási környezet

- Ügyeljen arra, hogy a terméket az alábbi feltételeknek megfelelő környezetben használja, tárolja és szállítsa. A tároláshoz és szállításhoz használja az eredeti csomagolást.

	Hőmérséklet	Páratartalom	Légköri nyomás
Alkalmazási környezet	10 és 35 °C között	30 és 90% relatív páratartalom között (páralecsapódás nélkül)	600 és 1060 hPa között
Tárolási és szállítási környezet	–30 és 50 °C között	10 és 95% relatív páratartalom között (páralecsapódás nélkül)	600 és 1060 hPa között

- Ne telepítse, ne tárolja és ne hagyja a terméket szélsőségesen meleg vagy párás környezetben. Emellett ne használja a terméket kültéren. Ez ugyanis problémákat vagy meghibásodást idézhet elő.
- Mindig törekedjen arra, hogy a helyiség a lehető legtisztább legyen. Sok éves használatot követően a helyiségben lévő szálló por lerakódhat az objektívlencsén és a mérőegység belső optikai alkatrészein. Poros eszközökkel nem lehet jó minőségű felvételeket készíteni.
- A használaton kívüli termékre rögzítse az objektívsapkát és helyezze fel a porvédő huzatot.

Telepítés

- A termék telepítését bízza értékesítési tanácsadójára vagy a helyi Canon forgalmazóra.
- Használjon a mellékelt ferritmaghoz csatlakoztatott USB-kábelt. A ferritmag rögzítését bízza értékesítési tanácsadójára vagy a helyi Canon forgalmazóra. Emellett használjon legfeljebb 2 méter hosszú USB-kábelt.
- Rögzítse az adatkábelt a mellékelt gyorskötözővel és kábelrögzítő talppal. Az adatkábel csatlakoztatását bízza értékesítési tanácsadójára vagy a helyi Canon forgalmazóra. Emellett használjon legfeljebb 2 méter hosszú adatkábelt.
- A terméket ért erős ütés miatt illeszkedési hibák állhatnak elő. Ezért kérjük, kezelje elővigyázatosan az egységet.

Ártalmatlanítás

A termék jogszabályba ütköző leselejtezése káros hatással lehet az emberi egészségre és a környezetre. Ezért a termék ártalmatlanításakor feltétlenül kövesse a használat helyén hatályos törvényeknek és előírásoknak megfelelő eljárást.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és a helyi előírásoknak megfelelően kell történni. A terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – például hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírás szerinti kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolódó potenciálisan veszélyes anyagok révén káros hatással lehet a környezetre és az egészségre. A termék megfelelő leselejtezésével pedig Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához. A termék újrahasznosításra való leadását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi hulladékkezelő közszolgáltatónál, a jóváhagyott WEEE rendszernél vagy a termék szállítójánál.

A fenti információk (beleértve az akkumulátorokra vonatkozókat is) honlapunkon az EU valamennyi tagországának hivatalos nyelvén elérhetők.

Lásd <https://global.canon/en/ifu/medcom/envfile/weee-battery-eu.pdf>.

Szoftverek


- (1) A szoftver és az illesztőprogramok telepítését és frissítését bízza értékesítési tanácsadójára vagy a helyi Canon forgalmazóra.
- (2) A számítógép és a Windows szoftverek kezeléséről tájékozódjon a megfelelő kezelési kézikönyvben.
- (3) Ezt a szoftvert csak [Users (Felhasználók)] vagy [Administrators (Rendszergazdák)] szintű jogosultsággal rendelkező felhasználók használhatják.
- (4) A következő műveletek végrehajtása előtt a meghajtó/mappa tulajdonságainak [Security (Biztonság)] lapján engedélyezze a [Modify (Módosítás)] lehetőséget a [Users (Felhasználók)] csoport, és a [Full control (Teljes hozzáférés)] lehetőséget az [Administrators (Rendszergazdák)] csoport számára.
 - Merevlemez hozzáadása a [Storage Management (Tárhelykezelés)] képernyőn.
 - DICOM, JPEG és BMP adatok exportálása.
 - Betegadatokat tartalmazó CSV-fájlok importálása.
 - Retinafelvételek importálása.
 - Adatok biztonsági mentése a biztonsági mentések tárolására szolgáló meghajtóra.
 - Vizsgálati adatok importálása és exportálása.
- (5) Ne használja a Windows [Switch User (Felhasználóváltás)] funkcióját (amely kijelentkeztetés nélkül vált a felhasználók között). Ha két vagy több felhasználó is használja a szoftvert, mindenképpen jelentkezzen ki a [Log Off (Kijelentkezés)] lehetőséggel, majd jelentkezzen be újra más felhasználóként.
- (6) Ügyeljen arra, hogy a számítógépen a képernyőkímélőt, az energiagazdálkodási lehetőségeket és a betűtípus-beállításokat az alábbiak szerint állítsa be.

Elemek	Beállítások
Képernyőkímélő	Nincs
Képernyő kikapcsolása	Soha
A számítógép alvó állapotba helyezése	Soha
Merevlemez kikapcsolása	Soha
A főkapcsoló megnyomásakor	Leállítás
Start menü főkapcsolója	Leállítás
Betűméret	Kicsi – 100% (alapértelmezett)

- (7) Ne állítsa a Windows számítógépet alvó és hibernált módba.
- (8) Ha alkalmazáshiba jelentkezik, vagy használat közben lefagy a szoftver, kövesse az alábbi utasításokat.
 - 1) Kapcsolja ki a számítógépet.
 - 2) Kapcsolja ki a terméket.
 - 3) Kapcsolja be a terméket.
 - 4) Kapcsolja be a számítógépet.
- (9) A szoftver futtatása közben ne frissítse a Windows-t. A Windows frissítése közben ugyanis lelassulhat vagy teljesen le is állhat a szoftver működése.

Terméken lévő címkék

Az alábbiakban bemutatjuk az OCT-n elhelyezett címkéket és jelöléseket.
Az OCT megfelelő használatához tartsa be a címkén lévő információkat.

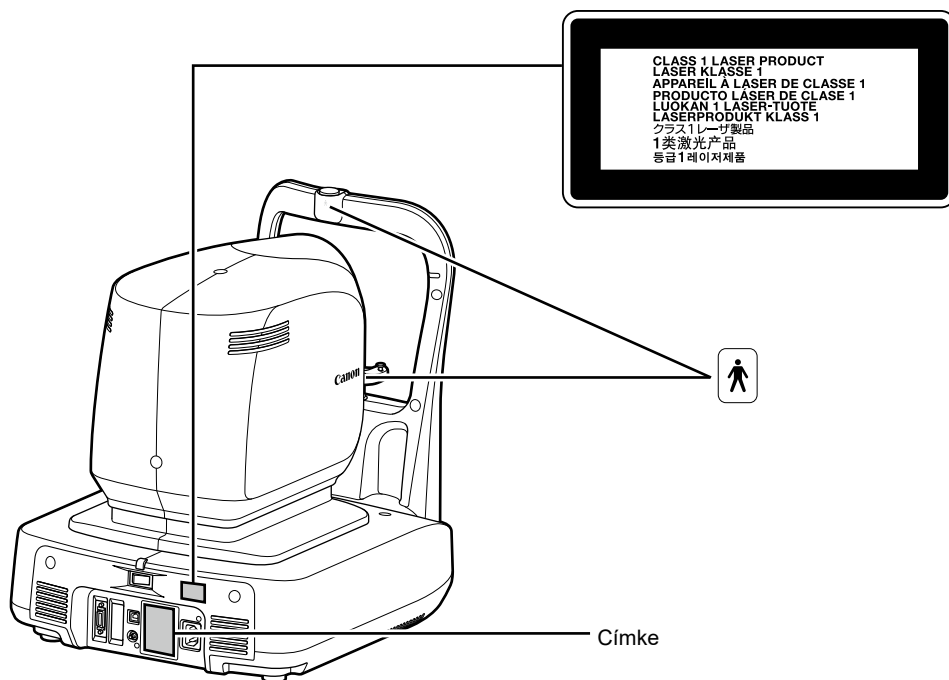

Az alábbi táblázat ismerteti a terméken található jelöléseket.

	Váltakozó áram
	B típusú alkalmazott alkatrész
	Olvassa el a használati útmutatót
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az orvostechnikai eszköz eleget tesz az (EU) 2017/745 rendelet előírásainak.
	Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE-irányelv) a termék szelektív gyűjtését írja elő. Az irányelv csak az Európai Unióban hatályos.
	Az Európai Közösségen belüli meghatalmazott képviselő
	Gyártó
	Sorozatszám
	Gyártás dátuma

3. Alapvető működés

Felkészülés a képalkotásra

A termék előkészítése

- 1 Távolítsa el a porvédő huzatot és az objektívsapkát.
- 2 Dugja be teljesen a tápcsatlakozót egy hálózati aljzatba.
- 3 Kapcsolja be a terméket.
- 4 Kapcsolja be a terméket.
- 5 Kapcsolja be a számítógépet és a monitort.
- 6 Adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a [Log In (Bejelentkezés)] gombra.

Betegadatok megadása

- 1 Adja meg az új beteg betegazonosítóját.
- 2 Adja meg a beteg többi adatát.
- 3 Kattintson az [OCT Capture (OTC képalkotás)] lapfülre.

Felkészülés a betegek vizsgálatára

- 1 Fertőtlenítse a homloktámaszt, és cserélje ki az álltámaszt védő papírt.
- 2 Tájékoztassa a páciens, hogy hogyan üljön a termék elé.
- 3 Állítsa be az álltámasz magasságát.

Tomogramok készítése

Vizsgálatsor kiválasztása

- 1 Kattintson az [R] gombra.
- 2 Kattintson az automatikus beállítás mód gombra.
- 3 A listából válassza ki a [Macula Disease (Makuladegeneráció)] vizsgálatsort.
- 4 Tekintse meg a pupillát.
- 5 Kattintson a [Start (Indítás)] gombra.

Képalkotás

- 1 Győződjön meg arról, hogy a képminőségjelző színe zöldre váltott.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a felső és alsó széleknél megjelennek az élő OCT-képek.
- 3 Állítsa be a tomogram dőlésszögét.
- 4 Kattintson a [Capture (Felvétel)] gombra.

Az elkészült felvétel ellenőrzése

- 1 Kattintson az [OK (Jó)] vagy az [NG (Nem jó)] gombra.

Jelentések megtekintése

Jelentések megtekintése

- 1 A felvételek készítés befejezése után kattintson a [Report (Jelentés)] lapfülre.

Jelentések exportálása és nyomtatása

- 1 Kattintson az [Output (Exportálás)] gombra.
- 2 Válassza ki a célmappát, majd kattintson az [OK (Jó)] gombra.

A termék kikapcsolása

- 1 Kattintson a [Log out (Kijelentkezés)] gombra.
- 2 Kattintson a [Shutdown (Leállítás)] gombra.
- 3 Kapcsolja ki a terméket.
- 4 Húzza ki a tápcsatlakozót a hálózati aljzatból.
- 5 Rögzítse az objektívsapkát, és a porvédő huzattal takarja le a terméket.

Biztonsági mentés és helyreállítás

A [Backup and restore (Biztonsági mentés és visszaállítás)] képernyőn végezheti el a szoftverrel rögzített betegadatok és vizsgálati adatok biztonsági mentését és visszaállítását. A biztonsági mentés végrehajtható automatikusan vagy manuálisan. Automatikus biztonsági mentés esetén megadható a mentési ütemterv. Adatbázishiba esetén vissza lehet állítani a betegadatokat és a vizsgálati adatokat. Ehhez válassza a [Database (Adatbázis)] menü [Local (Helyi)] menüpontjának [Backup and restore (Biztonsági mentés és visszaállítás)] elemét.

Meghajtó beállítása biztonsági mentéshez

Adja meg a célmappa elérési útvonalát a [Backup destination (Biztonsági mentés célmappája)] menüpontban, vagy a célmappa kiválasztásához kattintson a [Browse (Böngészés)] gombra.

Automatikus biztonsági mentés beállításai

Adja meg, hogy a hét melyik napján kerüljön sor az automatikus biztonsági mentésre, majd válassza ki a mentés típusát a listából.

- [Full Backup (Teljes mentés)]: Minden adatról készít biztonsági mentést.
- [Incremental Backup (Növekményes mentés)]: Csak az előző biztonsági mentés óta módosított adatokról készít mentést.

Válassza ki a listából az automatikus biztonsági mentés időpontját.

Az [At Exit (Kilépéskor)] lehetőség kiválasztása esetén az RX Capture for OCT-A1 szoftverből/RX szerverszoftverből történő kilépéskor kerül sor a biztonsági mentésre.

Amennyiben a teljes biztonsági mentés sikeres, törlődik a régi mentési napló. A régi mentési napló megőrzéséhez szüntesse meg a [Delete all old logs after succeeding to full backup (Összes régi napló törlése sikeres teljes mentés után)] jelölőnégyzet kijelölését.

Manuális biztonsági mentés

Kattintson a [Full Backup (Teljes mentés)] vagy az [Incremental Backup (Növekményes mentés)] gombra.

Megkezdődik a biztonsági mentés.

A biztonsági mentés megszakításához kattintson a [Cancel (Mégse)] gombra.

Mentési napló megjelenítése

Amikor rákattint a [Backup Logs (Mentési naplók)] lapfülre, megjelenik a mentési naplók listája.

Adatok visszaállítása

Az adatok visszaállításával helyreállítható az adatoknak a kiválasztott mentési napló időpontjáig rögzített állapota.

1 Válassza ki a kívánt mentési naplót, majd kattintson a **[Restore (Visszaállítás)]** gombra.

Például a 2012. 05. 16-i mentési napló kiválasztása esetén az adatok visszaállnak a 2012. 05. 16-i állapotra. Ezért törlésre kerülnek a 2012. 05. 17-én és azt követően rögzített betegadatok és vizsgálati adatok.

Megkezdődik a visszaállítás.

A folyamatjelző sávot megjelenítő képernyő eltűnése jelzi, hogy befejeződött a visszaállítás.

4. Karbantartás

Napi ellenőrzések

A termék biztonságos és megfelelő használatának biztosítása érdekében a használatba vétele előtt végezze el az alábbi ellenőrzéseket. Amennyiben az ellenőrzés során olyan problémát talál, amelyet nem tud elhárítani, kérjük, forduljon értékesítési tanácsadójához vagy a helyi Canon forgalmazóhoz.

Bekapcsolás előtti ellenőrzések

A termék bekapcsolása előtt ellenőrizze az alábbiakat.

- 1) A tápkábel és a csatlakozókábel nem sérült, és ép a szigetelésük.
- 2) A tápkábel teljesen és biztonságosan illeszkedik a termék váltakozó áramú csatlakozójába és a hálózati aljzatba.
- 3) A termék külső burkolata nem sérült és nem lazult meg.
- 4) Nincsenek karcolások és szennyeződések az objektívlencsén. Tisztítsa meg az objektívlencsét, ha szennyezett.
- 5) Nincs szennyeződés a számítógép monitorján. Tisztítsa meg a számítógép monitorját, ha szennyezett.

Bekapcsolás utáni ellenőrzések

Kapcsolja be a terméket, majd kapcsolja be a számítógépet. Bejelentkezés után ellenőrizze az alábbiakat.

- 1) Világít a POWER jelzőfény.
- 2) Az álltámasz akadálymentesen mozog fel és le, amikor rákattint a [Chin Rest (Álltámasz)] gombra.
- 3) A mérőegység akadálymentesen mozog fel és le, amikor rákattint az elülső szegmentum képére.
- 4) A mérőegység akadálymentesen mozog előre és hátra, amikor rákattint a [Z Adjustment (Z tengely beállítása)] gombra.
- 5) Megjelenik az SLO élő kép, amikor a [Start (Indítás)] gombra kattint.

A termék mozgatása

- 1 Kapcsolja ki a számítógépet.
- 2 Kapcsolja ki a terméket.
- 3 Távolítsa el a terméket és a számítógépet összekötő USB-kábelt.
- 4 Kapcsolja be a terméket.
- 5 Kapcsolja ki a terméket.
- 6 Mindenképpen húzza ki a tápcsatlakozót a hálózati aljzatból, és válassza le a más berendezésekhez csatlakozó kábeleket.
- 7 A terméket legalább két személy mozgassa.

Tisztítás és fertőtlenítés

Objektívlencse

Amennyiben az objektívlencse szennyezett, tisztítsa meg az alábbi eljárás szerint.

- 1 Ellenőrizze, hogy szennyezett-e a lencse.**
Ceruzalámpával világítsa meg az objektívlencsét, hogy lássa, nincs-e rajta szennyeződés.
- 2 Fújja le a port és a szennyeződéseket.**
Portalanító pumpával fújja le a lencsén lévő port és szennyeződéseket. Ne használjon ecsetet a por letörléséhez.
- 3 Törölje le az objektívlencsét.**
 - 1) Törölje le óvatosan az objektívlencsét egy lencsetisztító folyadékkal megnedvesített lencsetisztító kendővel.
 - 2) A lencse közepéről indulva körkörös mozdulattal haladjon a lencse pereme felé.
 - 3) Cseréljen lencsetisztító kendőt, és törölgesse addig az objektívlencsét, amíg szennyeződés- és csíkmentes nem lesz.

Homloktámasz/álltámasz

A tisztítandó felületeket fertőtlenítőszerrel megnedvesített steril gézzel vagy hasonló anyaggal tisztítsa.

Külső felület

Ha a termék külső felülete szennyezett, tisztítsa meg az alábbi eljárás szerint.

- 1 Kapcsolja ki a terméket.**
Kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
- 2 Törölje át tisztítószerrel átitatott kendővel.**
Törölje át a felületet hígított, semleges tisztítószerrel átitatott és alaposan kicsavart, puha kendővel.
- 3 Törölje át vízzel átitatott kendővel.**
Törölje át a felületet vízzel átitatott és alaposan kicsavart kendővel.

Függelék

Specifikációk

OCT felvétel

Az OCT felvétel egy tomogram, amelynek készítését a beállított szkennelési mód határozza meg.

Felbontás	Mélység (Z irány): Legfeljebb 3 µm Szélesség (X-Y irány): Legfeljebb 20 µm
Szkennelési sebesség	70 000 (0/-1000) A-scan/sec
Szkennelési terület	3 (V) x 3 (F) – 13 (V) x 10 (F) mm (±0,1 mm)
Fényforrás	SLD 855 (±5) nm

SLO kép

Az SLO képen megfigyelhető a szem elülső szegmentuma, valamint ellenőrizhető a fixációs pozíció és az SLO kép rögzítési területe.

Szkennelési mód	Konfokális lézeres pásztázó mód
Látószög	45 fok (V) × 34 fok (F) (13 × 10 mm)
Felbontás	25 µm
Fényforrás	LD 780 nm
Névleges tápfeszültség	100–240 V AC, 50/60 Hz, 3,7–1,6 A

Elemzési típusok

Makula vastagságának elemzése

Megjeleníti a makula tomogramját és a retinavastagság elemzési eredményeit.

NFL+GCL+IPL elemzés/GCL+IPL elemzés

Megjeleníti a makulától a látóidegfőig tartó terület tomogramját és a retinavastagság elemzési eredményeit.

Látóidegfő elemzése

Megjeleníti az RNFL (retinális idegrostréteg) vastagságát és a látóidegfő alakjának elemzési eredményeit.

Széles 3D-s szkennelés elemzése

Egyszerre szkenneli a makulát és a látóidegfőt, majd megjeleníti az elemzés eredményeit.

2D-s tomogramelemzés

Megjeleníti a meghatározott terület tomogramját és retinavastagságát.

Általános tomogramelemzés

Megjeleníti a meghatározott terület tomogramját és retinavastagságát.

OCTA felvételek

Megjeleníti az OCTA tomogramokat, valamint az érsűrűség és a vázsűrűség elemzési eredményeit.

3D-s elemzés

Megjeleníti a 3D-s tomogramot.

Elülső szegmentum elemzése

Megjeleníti az elülső szegmentum tomogramját és a szaruhártya-vastagság elemzési eredményeit.

EMD (Elektromágneses zavar)

A terméket az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos elektromágneses zavarokra vonatkozó hatályos előírásokat tartalmazó IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2) szabványnak megfelelően terveztük és teszteltük, és az alábbi információknak megfelelően kell telepíteni és üzembe helyezni.

1. Az elektromágneses zavarok miatt a gyógyászati villamos készülékek esetében különleges óvintézkedésekre van szükség, és a telepítésüket és üzembe helyezésüket a kézikönyvben megadott információk szerint kell elvégezni.
2. Ez a termék alkalmas kórházi környezetekben (hivatásos egészségügyi intézményekben) való használatra, kivéve az aktív NAGYFREKVENCIÁS SEBÉSZETI BERENDEZÉSEK környezetét, valamint a mágneses rezonancia képalkotáshoz használt ORVOSTECHNIKAI RENDSZER számára rádiófrekvenciásan leáryékkolt olyan helyiséget, ahol az ELEKTROMÁGNESES ZAVAROK intenzitása magas.
3. Az elektromágneses zavarokkal szembeni optimális teljesítmény fenntartása érdekében kizárólag az erre kijelölt kábeleket használja.

Név	Típus	Hosszúság	Megjegyzések
Váltóáramú tápkábel	Nem árnyékkolt	3,0 m rögzített hosszúságú	Tartozék
Szinkronkábel	Árnyékkolt	2,0 m	Tartozék
USB-kábel	AB típusú csatlakozódugó, amely támogatja a nagy sebességű USB 2.0 szabványt	Max. 2,0 m	Nem tartozék
Adatkábel	Árnyékkolt	2,0 m	Tartozék

4. FIGYELMEZTETÉS:

A Canon értékesítési tanácsadója vagy a helyi Canon forgalmazó által meghatározottaktól vagy biztosítottaktól eltérő tartozékok, jelátalakítók és kábelek használata megnöveli a berendezés elektromágneses kibocsátását vagy csökkenti elektromágneses zavartűrését, ami hibás működést eredményezhet.

5. FIGYELMEZTETÉS:

Kerülje a berendezés más berendezések melletti használatát, illetve más berendezésekre helyezését, mivel ez helytelen működéshez vezethet. Amennyiben a berendezést ilyen módon szükséges használni, akkor a normál működés ellenőrzése érdekében kísérelje figyelemmel a berendezések működését.

6. FIGYELMEZTETÉS:

A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket (beleértve a perifériákat, például az antennakábeleket és a külső antennákat is) nem szabad a termék bármely részétől 30 cm-nél kisebb távolságra használni, ideértve a Canon értékesítési tanácsadója vagy a helyi Canon forgalmazó által megadott kábeleket is. Ellenkező esetben csökkenhet a berendezés teljesítménye.

7. Alapvető teljesítőképesség (az elektromágneses zavarokkal szemben)

A lézer teljesítményének vagy a lézersugár besugárzási sűrűségének szabályozása
Ha meghibásodik vagy nem működik megfelelően a lézerszabályozó funkció, a termék mindkét esetben hangjelzéssel és üzenettel értesíti a felhasználót.

8. Elektromágneses zavarok miatt szükségessé válhat, hogy a termék vásárlója vagy felhasználója megismételje a mérést, illetve újraindítsa a berendezést, a szoftvert vagy a számítógépet.

Elektromágneses kibocsátás

Ezt a terméket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra terveztük.

A termék vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy a terméket ilyen környezetben használják.

Kibocsátási vizsgálat	Megfelelőség	Elektromágneses környezet – Útmutatás
RF-kibocsátás EN 55011 CISPR11	1. csoport	Ez a termék csak belső működéséhez használ rádiófrekvenciás energiát. Ezért rádiófrekvenciás kibocsátása nagyon alacsony, így valószínűleg nem okoz zavart a közeli elektromágneses berendezésekben.
RF-kibocsátás EN 55011 CISPR11	B osztály	A termék minden létesítményben használható, beleértve a lakóépületeket és a lakossági célú épületeket ellátó nyilvános kisfeszültségű villamosenergia-hálózathoz közvetlenül csatlakozó épületeket.
Harmonikus kibocsátás EN IEC 61000-3-2	A osztály	
Feszültségingadozás/vibráló kibocsátás EN IEC 61000-3-3*	Megfelel	

* Nem alkalmazható azokban a régiókban, ahol a névleges feszültség 220 V-nál alacsonyabb.

Jótállás és szervizelés

Élettartam

Az előírt ellenőrzések és karbantartások elvégzése esetén a termék élettartama nyolc év.

Műszaki leírás

A műszaki leírást lásd a termék használati útmutatójában.

Canon

Gyártó:



CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japán

Telefonszám: (81)-3-3758-2111